

Elektronische Pipettierhilfe

Profiller™ *electro* 447

Elektronische Pipettierhilfe mit optimaler Handanpassung für höchsten Bedienkomfort. Die Form ist ideal für die Arbeit mit Glas- oder Kunststoffpipetten im Laminarflow oder in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken.

Eine leistungsstarke, jedoch leise Motorpumpe mit mehreren Einstellungsmöglichkeiten garantiert ein effizientes Arbeiten, auch bei grösseren Pipettiervolumina.

Ein Jahr Garantie.

- Leistungsstarke Pumpe – füllt 25 ml in 3 Sekunden
- Komfortable Hebel zur Aktivierung per Fingerdruck
- Grosse, immer sichtbare Anzeige
- Batterieniveau-Anzeige in Echtzeit
- NiMH-Batterie, auch während Einsatz aufladbar
- Robuste Konstruktion für Stossfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Auswechselbarer Membran-Schutzfilter
- Kompakter Wand- und Standpipettenhalter



447

Pipetten
bis zu 100 ml und mehr



Wahl des Abgabemodus

Sofortige Aktivierung des Ausblas- (TC) oder Gravitationsmodus (TD).


Unmittelbare Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit

Mittels Schalter wählt man zwischen schnellerem oder langsamerem Ansaugen und Abgeben. Die Geschwindigkeiten werden deutlich am Display angezeigt.

Bestellinformationen

Profiller™ <i>electro</i> 447	Verpackung	Kat. Nr.
Mit Stecker und Ladegerät	1 / Vpk	447.100

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Membranfilter, 0.45 µm	5 / Vpk	322.447
Membranfilter, 0.2 µm	5 / Vpk	322.407
Silikon-Pipettenhalter	1 / Vpk	1.447.01
Konus	1 / Vpk	1.447.02

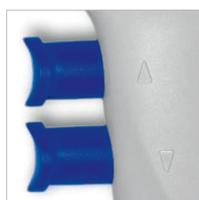

Fingerhebel

Mittels den zwei optimal positionierten Fingerhebeln kann das Ansaugen sowie die Pipettierfunktion durch minimale Betätigung gesteuert werden. Die Hebel ermöglichen eine stufenweise Geschwindigkeitsregulierung.



Aufladen des Akkus

Der Stecker ermöglicht das Aufladen des Akkus sowohl während der Lagerung als auch während des Arbeitseinsatzes. Der Ladezustand wird auf dem Display angezeigt.

Praktische Pipettenhalter

Das Instrument umfasst bei der Lieferung einen stabilen Pipettenhalter für die Bankmontage, welcher mit 3 Saugnäpfen ausgestattet ist und eine selbstklebende Wandmontage.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind Ladegerät und Kabel, vier Steckerformen (EU, USA/JP, GB, AUS/NZ), zwei hydrophobe Ersatzfilter (0.45 µm und 0.2 µm), Pipettenhalter, Wandaufhängung und Bedienungsanleitung.

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Ersatz Pipettenhalter für Bankmontage	1 / Vpk	320.947
Ersatz Pipettenhalter für Wandmontage	1 / Vpk	320.447
Ersatz 1.2V NiMH-Batterie	3 / Vpk	900.917