

Controlador electrónico de pipetas

Profiller™ *electro* 447

Este controlador de pipetas se adapta a cualquier mano de manera muy cómoda. La forma es ideal para trabajar con pipetas de vidrio o plástico en una cabina de flujo laminar o de seguridad microbiológica.

Un rendimiento de trabajo máximo, incluso con grandes volúmenes de pipeteado, se logra con una potente pero silenciosa motobomba y la disponibilidad de varias opciones de ajuste.

Un año de garantía.

- Una potente bomba - llena 25 ml en 3 segundos
- Disparadores de dedo cómodos
- Gran display siempre visible
- Indicador de carga de la batería en tiempo real
- Batería de NiMH recargable durante el uso
- Construcción fiable para una resistencia química y a los choques
- Filtro de membrana de protección intercambiable
- Soporte para sobremesa o para montaje mural compacto



447

Pipetas hasta 100 ml y más




Selección de modos de dispensado

Activación inmediata del dispensado con soplado (TC) o modo gravitacional (TD).

Ajuste inmediato de la velocidad

Un interruptor permite la selección de una aspiración rápida o lenta y velocidades de dispensado claramente indicadas en el display.

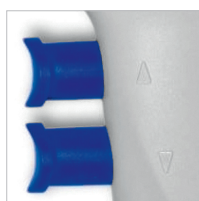

Pulsadores ergonómicos

Se controla la aspiración y el dispensado mediante dos pulsadores dispuestos de manera ergonómica. Esfuerzo mínimo de activación. Los pulsadores permiten una regulación gradual de la velocidad.



Carga de la batería

El enchufe del instrumento permite cargar la batería en posición de almacenamiento o durante el uso. Nivel de carga visible en el display.

Soportes prácticos

Instrumento suministrado con soporte de banco estable que incluye 3 ventosas y un colgador mural adhesivo.

Contenido del suministro

Suministrado con fuente de alimentación y cable, cuatro tipos diferentes de enchufe (EU, US/JP, GB, AUS/NZ), dos filtros hidrofóbicos de repuesto (0.45 µm y 0.2 µm), soporte de banco, colgador mural y manual de instrucciones.

Información de pedido

Profiller™ <i>electro</i> 447	Embalaje	Código
Con enchufe y alimentación	1 / caja	447100

Descripción	Embalaje	Código
Filtro de membrana, 0.45 µm	5 / caja	322.447
Filtro de membrana, 0.2 µm	5 / caja	322.407
Soporte de pipeta de silicona	1 / caja	1.447.01
Cono de punta	1 / caja	1.447.02

Descripción	Embalaje	Código
Soporte de reemplazo	1 / caja	320.947
Percha de pared de reemplazo	1 / caja	320.447
Batería NiMH de 1.2 V de reemplazo	3 / caja	900.917