

**Profiller™ *electro* 447**

Questo pipettatore si adatta a qualsiasi mano in modo straordinariamente comodo. La sua forma è ideale per lavorare con pipette in plastica o in vetro all'interno di una cappa a flusso laminare o di sicurezza microbiologica. Grazie alla pompa del motore, potente sebbene silenziosa, e alla disponibilità di svariate opzioni di impostazione è possibile raggiungere la massima efficienza di lavoro, anche con grandi volumi di pipettaggio. Un anno di garanzia.

- Pompa potente - riempie 25 ml in 3 secondi
- Grilletti di attivazione comodi
- Display ampio sempre visibile
- Indicatore della carica della batteria in tempo reale
- Batteria NiMH ricaricabile durante l'uso
- Struttura affidabile rispetto a shock e resistenza chimica
- Membrana filtrante di protezione sostituibile
- Supporto compatto per l'installazione su banco e a parete



**447**

Pipette fino a 100 ml e oltre



**Scelta di modalità di dispensazione**

Attivazione istantanea della dispensazione con espulsione (TC) o modalità gravimetrica (TD).


**Impostazione istantanea della velocità**

Un interruttore consente la selezione delle velocità di dispensazione e aspirazione, veloce o lenta, chiaramente indicate sul display.

**Informazioni per gli ordini**

Profiller™ <i>electro</i> 447	Imballo	Codice
Con spina e caricatore	1 / conf.	447/100

Descrizione	Imballo	Codice
Membrana filtrante, 0,45 µm	5 / conf.	322.447
Membrana filtrante, 0,2 µm	5 / conf.	322.407
Portapipetta in silicone	1 / conf.	1.447.01
Cono	1 / conf.	1.447.02

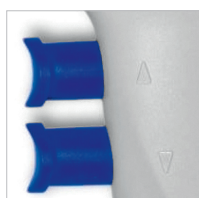

**Grilletti per le dita**

Aspirazione e dispensazione controllati tramite due grilletti posti in posizione ergonomica, che richiedono uno sforzo minimo per l'attivazione. I grilletti consentono la regolazione graduale della velocità.



**Ricarica della batteria**

La spina dello strumento consente di caricare la batteria sia a riposo sia durante l'uso. Il livello di carica è visibile sul display.

**Supporti comodi**

Strumento fornito con un supporto da banco stabile che include 3 ventose e un gancio adesivo da parete.

**Contenuto della fornitura**

Corredato di alimentatore e cavo, quattro adattatori per spina (UE, USA/Giappone, Regno Unito, Australia/Nuova Zelanda), due filtri idrofobici (da 0,45 µm e 0,2 µm), supporto da tavolo, gancio da parete e manuale d'istruzione.

Descrizione	Imballo	Codice
Supporto da banco di ricambio	1 / conf.	320.947
Gancio da parete di ricambio	1 / conf.	320.447
Batteria 1.2V NiMH di ricambio	3 / conf.	900.917