

Pipeteurs manuels

Le Profiller™ manual 437


Modèle robuste avec bonne prise en main et extrême simplicité d'emploi. Un seul levier de contrôle pour aspiration et distribution aisées. Adapté aux pipettes graduées (verre ou plastique) jusqu'à 100 ml.

Un an de garantie.

- grande capacité d'aspiration
- Activation douce du levier de contrôle
- Système efficace pour l'expulsion du liquide résiduel
- Filtre de protection avec membrane PTFE
- Sans entretien

437

Pipettes jusqu'à 100 ml

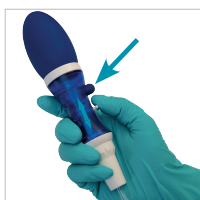

Poire en silicone

Comprimer la poire en silicone pour aspirer le liquide. Compression également possible en cours de pipetage pour augmenter la force d'aspiration.

Activation précise

Lever de contrôle utilisable de la main gauche comme de la droite. Aspiration et distribution en finesse, sans fatigue du pouce.

Expulsion du liquide résiduel

Presser le bouton prévu à cet effet afin d'expulser le liquide résiduel (pipette à écoulement total).



Filtre de protection

Filtre interchangeable avec membrane PTFE assure une protection efficace contre la contamination par aérosol.



Porte-pipette

La forme conique du porte-pipette en silicone assure une étanchéité parfaite, quel que soit le diamètre de la pipette utilisée (verre ou plastique). Autoclavable.

Commande - Profiller™ manual 437

Description	Emballage	No. cat.
Profiller™ manual 437, poire bleue	1 / pk	437100

Les Profillette™ 406

Pipeteur économique, facile à utiliser avec des pipettes graduées en verre ou en plastique. Tourner la mollette pour aspirer. Distribution rapide en appuyant sur le bouton de la soupape d'entrée d'air, plus lente en tournant doucement la mollette.



406

2 ml
10 ml
25 ml

- Pipetage d'une seule main
- Aspiration et distribution très simples
- Soupape d'entrée d'air pour un écoulement rapide
- Code couleur par taille
- Sans entretien

Commande - Profillette™ 406

Volume	Couleur	Emballage	No. cat.
2 ml	Bleu	1 / pk	406.002
10 ml	Vert	1 / pk	406.010
25 ml	Rouge	1 / pk	406.025
2 / 10 / 25 ml	Assorties	3 / pk	406.300

Commande - Accessoires

Description	Emballage	No. cat.
-------------	-----------	----------

Profillette™ 406

Porte-pipette en silicone	1 / pk	1.406.01
Cône de recharge	1 / pk	1.406.02

Profiller™ manual 437

Filtre à membrane, 0.45 µm	5 / pk	322.447
Porte-pipette en silicone	1 / pk	1.437.01
Cônes de recharge - Blanc	1 / pk	1.437.02